

3M Science.
Applied to Life.™

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

UP
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Kerr
ENDODONTICS

COLTENE

kuraray
Noritake



onthos

AERA MAX
PROFESSIONAL

N°1 gennaio 2019

HSK NEWS

APPROFONDIMENTI
&
NOVITÀ

www.henryschein.it

800 821010
numero verde

HENRY SCHEIN[®]
Krugg



HSK NEWS
APPROFONDIMENTI
&
NOVITÀ

Gentile Cliente,

siamo lieti di inviarle il primo numero della **nuova pubblicazione "HSK News"**.

Questa edizione nata in collaborazione con i nostri partner fornitori ha l'obiettivo sia di metterle facilmente a disposizione interessanti approfondimenti su prodotti già commercializzati dalla nostra azienda, sia di proporle in anteprima le novità più interessanti del 2019.

Questa è la prima uscita e la informiamo che HSK News avrà cadenza trimestrale. I nostri consulenti di vendita ed i promoter delle aziende produttrici saranno disponibili a fornirle ulteriori ed ancora più approfondite informazioni ed a tenerla aggiornata sulle relative promozioni.

Sperando di averle fornito un ulteriore strumento per approfondire la sua conoscenza su alcuni prodotti che potrebbero essere di grande interesse per svolgere al meglio la sua professione.

Cogliamo l'occasione per salutarla e augurarle un Buon 2019!

SOMMARIO

pagina

BRILLIANT EVERGLOW 4

LA SOLUZIONE 3M PER PERNI E MONCONI 5

BEAUTIFIL II LS 6

ENDO-EZE MTAFLOW 7

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 8

ELEMENTS™FREE OBTURATION SYSTEM 9

TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE 10

AERAMAX PRO AM II 11

IPS E.MAX CAD 12

 COLTENE

 Science.
Applied to Life.™



kuraray
Noritake

Kerr
ENDODONTICS




AERA MAX[®]
PROFESSIONAL


passion vision innovation

HSK NEWS

APPROFONDIMENTI
&
NOVITÀ

Integrazione alle SuperOfferte Gennaio - Marzo
valide dal 28/01/ 2019 al 8/03/2019
S.O. CODICE 30

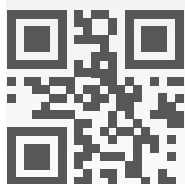

Scansiona e visita il Sito

www.henryschein.it

 HENRY SCHEIN[®]
Krugg



Il punto di vista del Relatore

«Come opinion leader di numerose aziende del dentale, ho avuto l'opportunità di testare e lavorare con molti compositi. Con Coltene Brilliant EverGlow è stato "amore a prima vista". E' estremamente semplice riprodurre correttamente un colore e mascherare un margine di preparazione, nonostante l'uso di un ridotto numero di tinte, ed ottenere risultati quotidiani predicibili e di elevato livello, sia da un punto di vista clinico che estetico».

Dr. Monaldo Saracinelli, guppo Style Italiano, Italia



BRILLIANT EverGlow

Lo splendore dell'arte



BRILLIANT EverGlow è stato sviluppato per offrire una perfetta combinazione di estetica di lunga durata, praticità d'uso e resistenza meccanica.

BRILLIANT EverGlow è un composito sub-microibrido universale altamente estetico e di facile utilizzo, indicato per tutti i restauri diretti su anteriori e posteriori. Inoltre, può essere utilizzato per cementare e riparare i restauri in ceramica e composito (ad esempio COMPONEER).

Le speciali caratteristiche dei riempitivi lo rendono facilmente lucidabile garantendo il **mantenimento** della stessa nel tempo. **Ideale lavorabilità** grazie alla buona bagnabilità ed all'**eccezionale integrazione cromatica**.

La scala colori del **BRILLIANT EG** possiede tre livelli di traslucenza ed è caratterizzato da una eccezionale capacità mimetica. Grazie al sistema **DuoShade**, con solo 7 masse universali, si coprono tutte le esigenze clinico-estetiche. Comprende inoltre due masse smalto e tre masse opache.

Tutte le tinte **BRILLIANT EG** universali, traslucenti e opachi sono disponibili in ricambi siringhe da 3g o tip da 0.2g oppure in kit. Il Kit introduttivo economico contiene un assortimento di quattro tinte universali tra le più utilizzate in conservativa.

PUNTI DI FORZA di BRILLIANT EverGlow

Evidenziati da 33 consulenti Dental Advisor, in 771 trattamenti:

- Sistema versatile con diversi livelli di traslucenza.
- Facile lavorabilità ed applicazione, grazie alla consistenza liscia.
- Buon adattamento alla cavità.
- Sistema colori versatile, semplice e razionale.
- Brillantezza elevata mantenuta nel tempo.
- Estetica ottenibile anche con una sola massa universale.
- Siringa composta da un involucro esterno in plastica trasparente liscia, ottimizzata per impedire le contaminazioni crociate e la per diti dell'etichetta informativa. Può essere igienizzata con un disinfettante per superfici.

Siringa da 3g (codici a pag. 142)

Kit Siringhe Highlight

Codice 99 87468

Contiene:

3x Siringhe 3gr/cad. **BRILLIANT EverGlow**
(1pz. per tinta: A1/B1, A2/B2, A3/B3)

1x **One Coat 7 Universal** 5ml

50x Spazzolini neri

2x **DIATECH ShapeGuard**
spazzolini per composito



-50%

€ 133,00

VALORE CONTENUTO
€ 266

PREZZO OFFERTA

€ 31,79 cad.+IVA anzichè € 48,90

**SCONTO
35%**

min. 3 siringhe
a scelta



Scansiona e visita il Sito

info.it@coltene.com

www.coltene.com

COLTENE.IT






3M sviluppa da sempre tecnologie e prodotti innovativi,

prendendo spunto anche dalla vostra esperienza clinica. Perché una procedura sia effettivamente un successo clinico è fondamentale che duri il più a lungo possibile. L'articolo dei Dottori Catherine O'Neil e Frederick A. Rueggeberg, pubblicato sul Journal of Esthetic and Restorative Dentistry*, conclude che Filtek™ One è l'unico bulk, fra quelli sottoposti a test, che resiste all'usura da spazzolamento come Filtek™ Supreme XTE, composito universale preso come riferimento grazie ai suoi 15 anni di storia clinica.

La soluzione 3M per perni e monconi

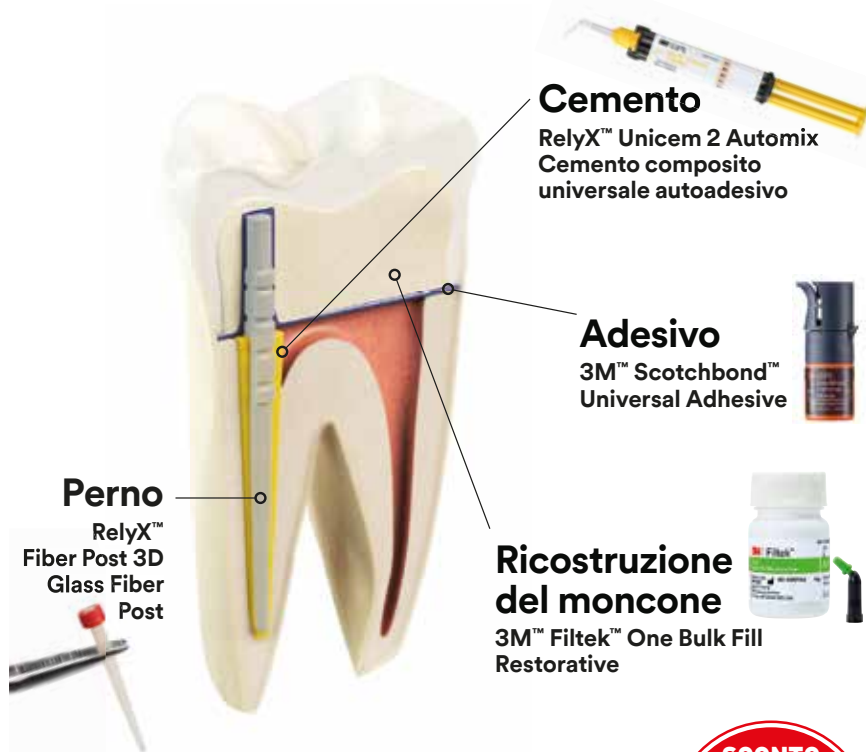

Per risultati predicibili - in minor tempo.

Lo sappiamo: la procedura endodontica è molto complessa.

Quindi, più la procedura per il restauro endodontico è semplice e affidabile e meglio è – sia per il dentista sia per il paziente.

L'eccellente soluzione di 3M per perni e monconi è un grande passo in avanti in questa direzione: grazie a un numero significativamente inferiore di passaggi clinici e prodotti, vi permette di lavorare in modo più rapido, semplice ed efficiente.

Tutto ciò che vi serve è il nuovo RelyX™ Fiber Post 3D Glass Fiber Post più altri tre prodotti semplici da utilizzare di 3M Oral Care: RelyX™ Unicem 2 Automix cemento composito autoadesivo, Scotchbond™ Universal adesivo e Filtek™ One Bulk Fill Restorative.

SCONTO TOTALE
49%
CIRCA

Acquista:

- 1 confezione di **RelyX™ Unicem 2** a € 97,20 (codici a pag. 224)



- 2 confezioni di **Filtek™ One** a € 46,80 cad. (codici pag. 156)



Inoltre ricevi **IN SCONTO MERCE**

1 confezione di **RelyX™ Fiber Post 3D**

misura 1 - valore € 137,80 iva inclusa - (codice 03 41476)

PREZZO OFFERTA

€ 190,80 +IVA anziché € 371,00



*O'Neill C, Kreplak L, Rueggeberg FA, Labrie D, Shimokawa CAK, Price RB. Effect of tooth brushing on gloss retention and surface roughness of five bulk-fill resin composites. J Esthet Restor Dent. 2018;30:59-69. <https://doi.org/10.1111/jerd.12350>

Scansiona e visita il Sito



www.3mitalia.it/odontoatria

Beautiful II LS

Beautiful II LS (Low Shrinkage), sviluppato dal consolidato Beautiful II, garantisce al dentista una contrazione minima con una massima estetica. La caratteristica fondamentale di questo composito universale in pasta è la contrazione da polimerizzazione straordinariamente bassa, pari solo a 0,85 % in volume. Inoltre è caratterizzato da un'eccellente lucidabilità e da un naturale adattamento cromatico alla struttura del dente.

Il materiale contiene riempitivi S-PRG bioattivi che agiscono contemporaneamente come fonte e riserva di fluoro: in base alla concentrazione di fluoro in bocca, essi rilasciano e ricaricano questo oligoelemento - per una terapia restaurativa stabile nel tempo e cario-protettiva.

Usato in combinazione con BeautiBond, l'adesivo "all-in-one", perfettamente accordato al sistema, si aumenta l'azione cario-protettiva della tecnologia dei riempitivi S-PRG.

Massima estetica, minima contrazione



Disponibile anche in tips!

Vantaggi

- Bassa contrazione (< 1%) e tensione da contrazione
- Eccellente lucidabilità e lucentezza duratura
- Elevata resistenza all'abrasione e durezza superficiale nel rispetto dell'antagonista
- Trasmissione e diffusione naturale della luce
- Rilascio e ricarica di fluoro duraturi
- Gamma cromatica identica a quella di Beautiful II

**Introkit 4 siringhe da 4 gr cad.:
1xA2, 2xA3, 1xA3,5**
(codice 03 44196)


SCONTO
25%

PREZZO LANCIO

€ **159,00** +IVA anziché € ~~212,00~~



I colori da A1 a C3 corrispondono alla scala colori VITA® Classical.

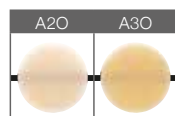

* VITA è un marchio registrato da VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germania.



Scansiona e visita il sito



www.shofu.it

ENDGEEZE MTA FLOW

MTA Flow è il nuovo cemento per riparazione a base di Triossido Minerale Aggregato della Ultradent. Progettato per essere miscelato velocemente e facilmente, **raggiungendo la consistenza ideale per differenti tipologie di procedure**, può essere applicato anche tramite le siringhe e le cannule NaviTip dal diametro di 29 ga, assicurando un posizionamento preciso, per un trattamento efficace.

La formulazione resistente all'erosione/dissolvimento, aiuta il composito a rimanere in situ. La proporzione di miscelazione tra il gel e la componente in polvere è modificabile in funzione alla tipologia di procedura. Si raccomanda una consistenza più spessa per gli incappucciamenti pulpari, perforazioni della camera pulpare e pulpotomie; una consistenza fluida per riassorbimenti, apacificazioni e tappi apicali; consistenza putty per otturazioni apicali. Con MTA Flow si **ha la giusta consistenza per la giusta procedura.**

NOVITÀ

ENDGEEZE MTA FLOW™

CEMENTO PER RIPARAZIONE A BASE DI TRIOSSIDO MINERALE AGGREGATO



SCONTO
TOTALE
22%
CIRCA

OFFERTA SPECIALE:

1 confezione MTA Flow Kit (8-10 applicazioni)

+ in sconto merce

20 cannule NaviTip da 29ga azzurre 25 mm

valore **€47,46** iva inclusa

NaviTip 29 ga

sono cannule flessibili in punta ideale per l'applicazione di materiale all'interno del canale.

Caratteristiche tecniche

- materiale bioattivo
- consistenza ideale
- resistente all'erosione/dissolvimento
- può essere applicato con le cannule NaviTip con diametro da 29ga
- si miscela rapidamente
- tempo di lavorazione una volta miscelato 15 minuti
- contenuto del kit: 1 MTA Flow in polvere (2g), 1 MTA Flow in gel (2ml), 1 cucchiaio misuratore, 1 blocco per miscelazione, 20 puntali Micro 20ga, 10 siringhe Skini, 10 Tappi Luer Lock (codice 04 43906)

€ **159,00** +IVA
anzichè € ~~204,40~~



Ultradent Italia Srl
N. Verde 800 830 715
www.ultradent.it
info@ultradent.it

Guarda il video per scoprire il nuovo MTA Flow





Ecco cosa mi ha conquistato!

La prima cosa che valuta un clinico quando lavora un composito è la qualità del suo handling, e quella di CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 è perfetta. Si lascia modellare con semplicità mantenendo la forma conferita al modellato senza mai deformarsi. Sono rimasto colpito dalla lucidabilità che si riesce ad ottenere meccanicamente, anche senza ricorrere alle paste da lucidatura. Ma c'è un aspetto che mi ha particolarmente impressionato: l'eccezionale equilibrio di traslucenza ed opacità delle masse che, se impiegate correttamente, consentono di ottenere una integrazione del colore veramente sorprendente.

Dr. Salvatore Scolavino, Nola (Na)

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 il composito a traslucenza attiva



Scopri di più su: www.kuraraynoritake.eu/promopackes-2

GESTIRE TUTTI I RESTAURI CON UN SOLO KIT? SCOPRI CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 PROMO PACK "ALL IN TEN"

ALL IN TEN

è la selezione di dieci siringhe per tutte le classi di Black da I a V nel pratico e funzionale display in plexiglass: contiene tre siringhe CLASSIC-Body A2-A3-A3.5, due dentine A1D, A3.5D, due smalti A1E e WD, due fl uidi ad alta carica e doppia opacità A3 e A3D.

Contenuto:

- 7 Siringhe ES-2 (3,6g cad.): A2, A3, A3.5, A1D, A1E, WD, A3.5D
- 1 siringa ES-2 (1,8g): Blue
- 2 siringhe ES Flow (2,7g cad.): A3, A3D
- 1 Universal Bond Quick Trial (1ml)
- 1 TWIST DIA
(1 Pre-polisher + 1 High-shine polisher)
- 1 display in plexiglass
(codice 03 43586)

**GUARDA LA PRESENTAZIONE DI
CLEARFIL MAJESTY[®] ES-2
DEL DR. SALVATORE SCOLAVINO**



€ 339,00 +IVA
anzichè ~~€ 498,00~~

kuraray

Noritake



Kuraray Europe Italia S.r.l.
Tel: 02 6347 1228

E-mail: dental-italia@kuraray.com

Sito internet: www.kuraraynoritake.eu/it

facebook.com/KurarayNoritakeInLab

facebook.com/KurarayNoritakeInClinic

Otturazione canalare 3D cordless



È UN'INNOVAZIONE
SENZA FILO
DOTATA DI UNA
RIVOLUZIONARIA
TECNOLOGIA
BASATA SUL
SISTEMA ELEMENTS
OBTURATION UNIT
(EOU)

SCONTO
26%

Caratteristiche tecniche

- L'unità Downpack raggiunge la temperatura di 200°C in meno di 0,5 secondi e offre la possibilità di regolarla nel range compreso tra 100 e 400°C.
- Il pulsante di attivazione ad anello, attivabile a 360°, migliora l'impiego.
- Controllo digitale della temperatura per un'accuratezza della procedura.
- Perfetto per la tecnica di Condensazione a Onda continua e otturazione con un singolo movimento.
- Estrusione motorizzata per un minore affaticamento della mano.
- Nuove cartucce di gutta-perca dotate di ago più flessibile e resistente.
- L'isolamento mediante Aerogel assicura il vostro comfort e la sicurezza del paziente.
- Risultati predicibili: otturazioni 3D di elevata qualità.
(codice 99 41103)

€ **1.698,30** +IVA
anzichè € ~~2.295,00~~

elementsTMfree Obturation System è un sistema cordless, semplice da utilizzare, per l'otturazione canalare. I dispositivi Downpack e Backfill sono disponibili in configurazione combinata o singola, entrambi dotati di base di ricarica per la batteria.





DECONTAMINATION

Prevenire il rischio biologico è di fondamentale importanza per proteggere la salute dei pazienti e del personale dello studio odontoiatrico. Per questo è necessario eseguire un corretto ciclo di sterilizzazione che rispetti i protocolli operativi in ogni fase, partendo quindi dalla raccolta degli strumenti fino ad arrivare allo stoccaggio degli stessi.

La tracciabilità del processo di sterilizzazione è collegata al concetto di rintracciabilità del prodotto e quindi alla sterilità dello stesso. Se infatti si riesce a dare evidenza che il processo è stato controllato ed è conforme agli standard attualmente vigenti allora il prodotto risultante sarà sterile. Questo è l'unico modo per proteggersi da eventuali contenziosi legali in caso di problemi post-operatori.

TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE

Solo con la linea A Plus delle Autoclavi Anthos è possibile eseguire un processo di tracciabilità semplice ed immediato associando univocamente il ciclo di sterilizzazione utilizzato sulla busta al paziente sul quale la busta è stata utilizzata

Autoclave

Stampante esterna per codici a barre

Lettrare barcode

Sistema per la tracciabilità

“La TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE non è mai stata così facile! METTITI AL RIPARO DAI CONTENZIOSI!”

SCOPRI
L'OFFERTA
SUL NUMERO
1_19
Gennaio/Marzo 2019

tutt'uno




anthos.it

Attrezzature
800 011423

decontamination.it

Visita il Sito

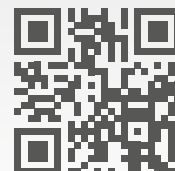



DECONTAMINATION TRATTAMENTO ARIA

La contaminazione particolata dell'aria dello studio odontoiatrico, pur essendo un concetto "esterno" al processo di sterilizzazione, è in realtà molto importante e ad esso collegato al fine di garantire e preservare il livello di decontaminazione raggiunto dai dispositivi medici. L'aerosol generato dagli strumenti rotanti può infatti diffondersi per lungo raggio all'interno dello studio andando quindi a contaminare l'ambiente di lavoro.

NOVITÀ

AERAMAX PRO AM II



“ Elimina il 99,9% dei particolati aerei quali virus, germi, batteri, pollini, spore della muffa ”

- Purificatore d'aria con ionizzatore bipolare, per ambienti fino a 30 m².
- Testato sul virus dell'influenza con un'efficacia del 95%.
- Il filtro ai carboni attivi elimina efficacemente odori e vapori chimici. 100% automatico, non necessita di settaggi o manutenzione grazie alla tecnologia EnviroSmart che regola automaticamente la potenza di purificazione in base alla qualità dell'aria ottimizzando performance e consumi.
- Anche nella versione da terra con piedistallo venduto separatamente.



Se qualche collega avesse dubbi sull'acquisto ditegli a mio nome che è una follia. E' uno strumento indispensabile per respirare aria pulita. Grazie per avercelo venduto!

Dr. Stefano Milani
Studio dentistico Torsello & Milani

MODELLO	AM II
Installazione	Fissaggio a muro (a terra opzionale)
Dimensioni ideali stanza da purificare	15-30 m ²
Destinazioni d'uso	Sale d'attesa, ambulatori, sale operatorie, laboratori, uffici

SCOPRI L'OFFERTA SUL NUMERO 1_19
Gennaio/Marzo 2019

tutt'uno

AERAMAX
PROFESSIONAL
aeramax.it




Scansiona e visita il Sito



Attrezzature
800 011423

decontamination.it

Visita il Sito

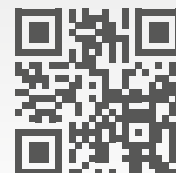

IPS e.max CAD



Alta resistenza e risultati comprovati - da oltre dieci anni.

Oltre dieci anni di test continui di qualità lo dimostrano: rispetto ad altre vetroceramiche CAD / CAM, IPS e.max CAD possiede una resistenza alla flessione biassiale di livello ineguagliabile pari a 530 MPa. Grazie ai valori elevati di resistenza alla flessione e resilienza, per il disilicato di litio IPS e.max CAD si aprono nuove opportunità nell'odontoiatria minimamente invasiva.

In caso di corone completamente anatomiche e faccette occlusali (Table Top), questi valori consentono di realizzare uno strato di un solo millimetro di spessore in abbinamento a cementazione adesiva. In generale, a seconda dell'indicazione i restauri IPS e.max possono essere cementati con la tecnica adesiva, autoadesiva o convenzionale. La pubblicazione di Randi et al. (2017) mostra risultati analoghi: sia i valori di resistenza biassiale che i valori di resilienza sono stati significativamente più elevati per IPS e.max CAD rispetto agli altri materiali esaminati.



IPS e.max CAD

Vetroceramica al disilicato di litio (LS2) IPS e.max® CAD è la vetroceramica più venduta al mondo⁽¹⁾. È indicata per l'efficiente realizzazione di restauri interamente anatomici, rappresenta la flessibilità con un completo spettro di indicazioni e possiede un'elevata resistenza di 530 MPa⁽²⁾.

Resistenza a rottura 2.11 MPa · m^{1/2}⁽⁸⁾

Possibilità di lavorazione

Il restauro „blu“ può essere:

- lucidato e poi cristallizzato
- glasato e cristallizzato in un'unica fase di lavoro
- pitturato, glasato e cristallizzato in un'unica fase di lavoro

Indicazioni:

- Corone mininvasive (1 mm)⁽³⁾
- Corone
- Ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale)
- Trattamenti ibridi a supporto implantare (abutment ibridi, corone abutment ibride)
- Faccette, faccette sottili (0,4 mm) e faccette occlusali
- Inlays, onlays, corone parziali

Vantaggi

- Eccellente estetica con elevata resistenza di 530 MPa⁽²⁾, realizzata efficientemente nello studio dentistico
- Spettro di indicazioni completo per l'utilizzo CAD/CAM chairside
- Preparazione di corone mininvasive, per cementazione adesiva
- Successo clinico a lungo termine e risultati scientificamente documentati.

(1) In base ai dati di vendita.

(2) Resistenza alla flessione biassiale media per 10 anni, R&S Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein.

(3) La pluriennale esperienza clinica e l'elevata resistenza in combinazione con la cementazione adesiva consentono uno spessore delle corone di minimo 1 mm.

(8) Hill T, Tysowsky G. Fracture toughness, KIC, of five CAD/CAM glass-ceramics. Meeting annuale AADR/CADR: 1672, 2016.



LINEA COMPLETA

Codici e Prezzi:

Catalogo Studio da pag. 650 a 652

Catalogo Laboratorio da pag. 37 a 39

Supera
le aspettative

IPS e.max®

All ceramic,
all you need.

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Scansiona e visita il Sito

blog.ivoclarvivadent.com/
dentist/it/highlights/
alta-resistenza-e-risultati
-comprovati-da-oltre
-dieci-anni

